

# FLOCARE® GRAVITY ERNÆRINGSSÆT

**Engangs enteralt ernæringsset til brug uden pumpe. Uden DEHP og andre phthalater.**

De forskellige **Flocare® Gravity™** ernæringsset er beregnet til tilkobling af sondeernæring til nasalsonder, PEG-sonder eller til forlængerslanger til gastrostomi knapsonder, når indgivelse af sondeernæring sker uden brug af pumpe. Den lilla farve signalerer en tydelig forskel fra administrationsset til parenteral brug.

#### **Flocare® Pack set Gravity™**

for tilkobling af både Nutricias og andre leverandørers sondeernæring i Pack (pose).

#### **Flocare® Universal set Gravity™**

for tilkobling af både Nutricias og andre leverandørers sondeernæring i plastic- og glasflaske.




Flocare® Pack set  
Gravity™

Flocare® Universal set  
Gravity™


## VAREINFORMATION

	Nutricia varenr.	Salgsenhed
Flocare® Pack set Gravity™	586460	30 stk.
Flocare® Universal set Gravity™	590070	30 stk.

## FLOCARE® GRAVITY™ ERNÆRINGSSÆT:

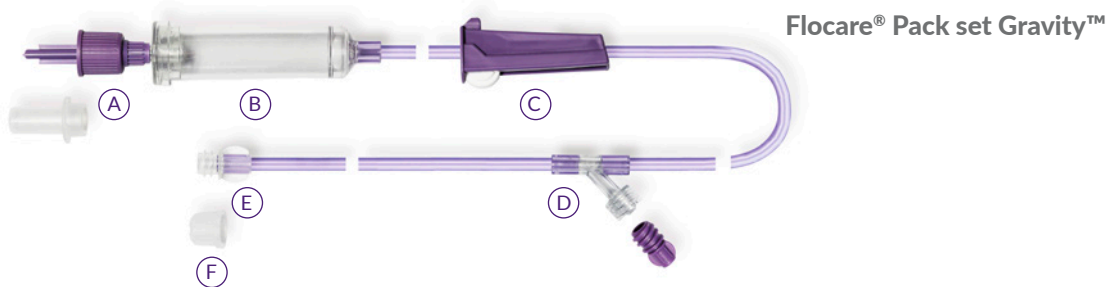

Flocare® Pack set Gravity™

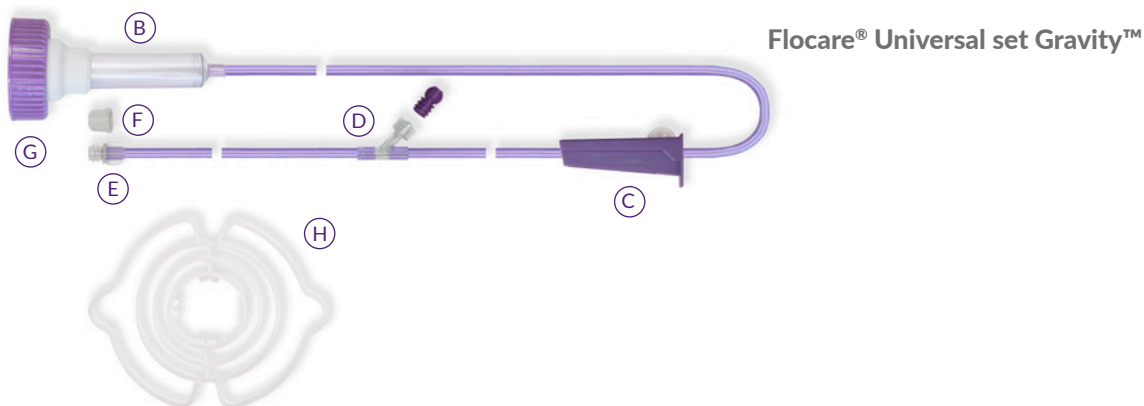

Flocare® Universal set Gravity™

### Består af:

- A: Plusformet ENPlus Cross Spike
- B: Dråbekammer
- C: Rulleklemme
- D: Y-kobling til indgivelse af medicin og gennemskylning (med hætte)
- E: Hun luer-lock konektor
- F: ENFit han konektor (ikke IV kompatibel) med støvhætte
- G: Flaske konektor til glas og sutteflasker (følger med universal sæt)
- H: Flaskeophæng (følger med universal sæt)

### Varianter:

Pack sæt til brug med Nutricias og andre leverandørers sondeernæring i Pack (pose).  
Universal sæt til brug med Nutricias og andre leverandørers sondeernæring i plastic- og glasflaske.

### Materiale:

PVC-godkendt til medicinsk brug, fri for phthalater.

### Emballage:

Enkeltvis sterilt pakket.

### Holdbarhed:

36 måneder fra produktionsdato. Holdbarhedsdato fremgår af mærkning på pakningen.

### Opbevaring:

Opbevares ved stuetemperatur.

### Brugstid:

24 timer.

FLOCARE® GRAVITY ernæringsæt opfylder EU-direktivet for medicinsk udstyr: MDD/93/42/EEC.